

a naturally
SPECIAL smile

DISTRIBUTORE LOCALE:



MYERSON SPECIAL

Carta Forme • Denti in resina



PER I PIÙ ELEVATI STANDARD NELL' ESTETICA DENTALE

I denti Myerson New Special, composti da una rete polimerica interpenetrante acrilica appositamente formulata, sono stati creati per soddisfare le esigenze di dentisti ed odontotecnici, ma soddisfano pienamente anche la richiesta estetica dei pazienti.

I denti Myerson New Special sono disponibili in una vasta gamma di forme nei 16 colori Vita – da A1 a D4, ed in 6 nuove colorazioni (I61, I62, I65, I66, I67, I81). Ogni singola forma è caratterizzata a mano in modo da ricreare l'aspetto di una dentatura naturale e ben curata.

La gamma delle forme varia da piatte a curve, a bordo approssimale lungo o corto. La gamma delle modellature labiali varia da lisce a rugose, consentendo l'adattamento alle caratteristiche personali anche dei pazienti più esigenti.

I VANTAGGI ESTETICI DEI DENTI MYERSON SPECIAL:

- **Fluorescenza naturale:** valori costanti della colorazione in qualsiasi condizione di luce
- **Trasparenza e brillantezza superficiale naturali:** in perfetta armonia con i denti naturali adiacenti
- **Eccellenti per protesi parziali:** modellature labiali naturali, punte incisali irregolari e forma linguale estesa



CARATTERISTICHE FISICHE E CLINICHE DEI DENTI MYERSON SPECIAL

- **Alta densità:** assenza di porosità, maggiore pulizia, maggiore facilità nella molatura
- **Durevolezza superiore:** la formula a legame incrociato degli Special mantiene le molecole di resina così strettamente affiancate da renderle resistenti a macchie e usura
- **Nessuna perdita di colore:** i denti Myerson Special non perdono la colorazione né durante né dopo la lavorazione
- **Superaderenza:** nessuna fuoriuscita – il legame perfetto rende la protesi compatta
- **Resilienza:** preserva i tessuti, minore fragilità - nessuna frattura - nessuna riparazione durante la lavorazione

Vedi la differenza...

MACCHIE APPROSSIMALI • SUPERFICI IRREGOLARI • STRIATURE DELLO SMALTO • CARATTERIZZAZIONE AL COLLETO



OTTURAZIONI IN COMPOSITO • DECALCIFICAZIONI • AREE INCISALI TRASLUCIDE • CANINO CARATTERIZZATO



Varietà delle Forme


I denti Myerson Special sono disponibili in un'ampia gamma di tipi e forme per poter adattare le protesi alle caratteristiche personali ed ai lineamenti del viso dei pazienti.

FORME ANTERIORI SUPERIORI

I denti anteriori Myerson sono disponibili in tre tipi di forme:

1. **'A'** Forme Estetiche
2. **'Y'** Forme Giovanili
3. **'P'** Forme Principali


CODICE			
Tipo di forma			
			
	Estetica	Giovanile	Principale

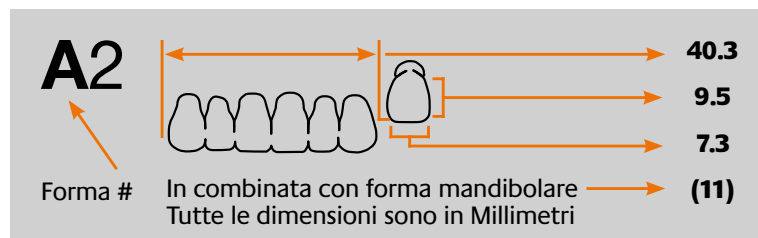

'A' Forme Estetiche

- Forme sottili con un eccellente equilibrio tra bordo approssimale e bordo oclusale
- Modellatura labiale sottile e sfumatura realistica




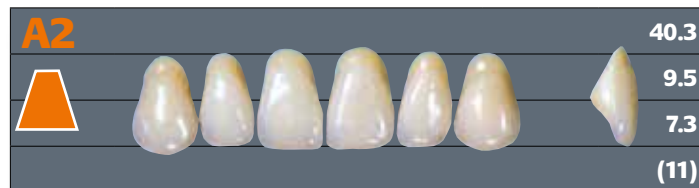


Anteriori inferiori - Forma 11, **Posteriori** - Forma 28




Anteriori inferiori - Forma 8, **Posteriori** - Forma 32

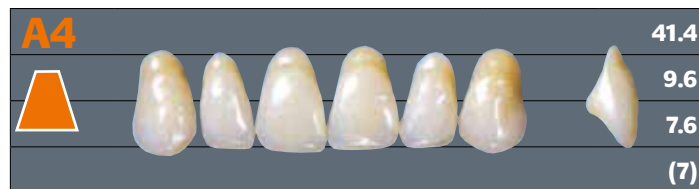


Anteriori inferiori - Forma 7, **Posteriori** - Forma 28

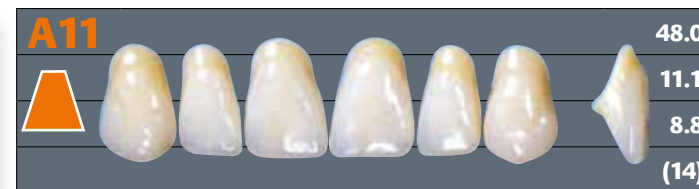

Anteriori inferiori - Forma 14, **Posteriori** - Forma 34

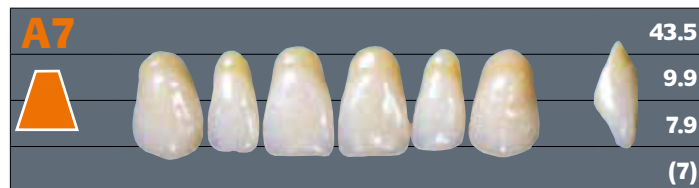

Anteriori inferiori - Forma 7, **Posteriori** - Forma 30

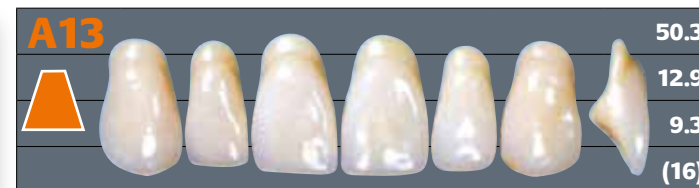

Anteriori inferiori - Forma 16, **Posteriori** - Forma 34

Varietà delle Forme


I denti Myerson Special sono disponibili in un'ampia gamma di tipi e forme per poter adattare le protesi alle caratteristiche personali ed ai lineamenti del viso dei pazienti.

FORME ANTERIORI SUPERIORI

I denti anteriori Myerson sono disponibili in tre tipi di forme:

1. **'A'** Forme Estetiche
2. **'Y'** Forme Giovanili
3. **'P'** Forme Principali


CODICE			
Tipo di forma			
			
	Estetica	Giovanile	Principale

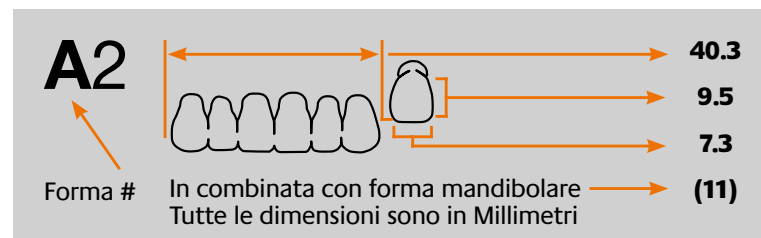


'A' Forme Estetiche

- Forme sottili con un eccellente equilibrio tra bordo approssimale e bordo oclusale
- Modellatura labiale sottile e sfumatura realistica




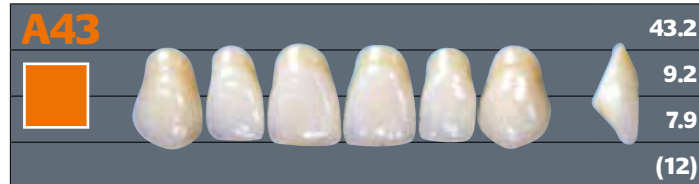


Anteriori inferiori - Forma 12, **Posteriori** - Forma 30

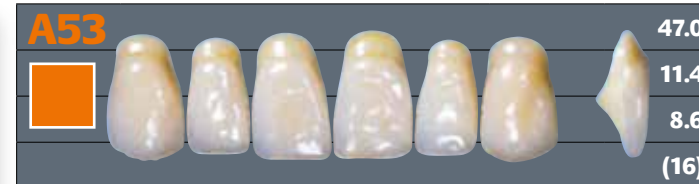


Anteriori inferiori - Forma 16, **Posteriori** - Forma 34

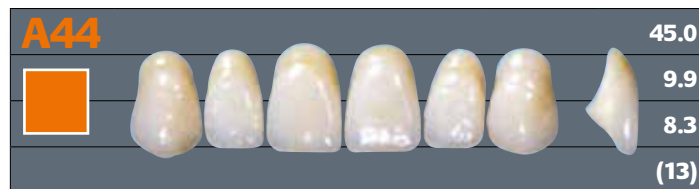

Anteriori inferiori - Forma 13, **Posteriori** - Forma 32

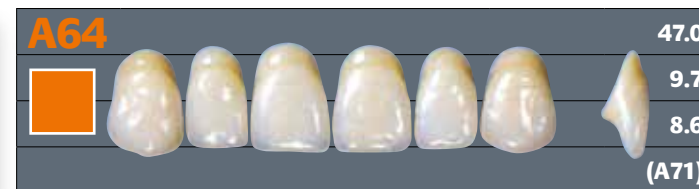

Anteriori inferiori - Forma A71, **Posteriori** - Forma 32

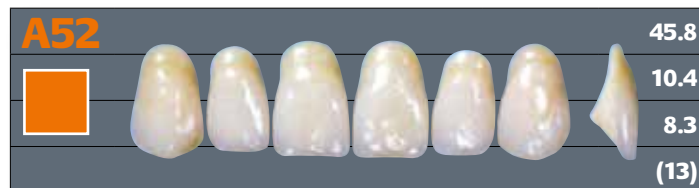

Anteriori inferiori - Forma 13, **Posteriori** - Forma 32



Anteriori inferiori - Forma A73, **Posteriori** - Forma 34

Varietà delle Forme


I denti Myerson Special sono disponibili in un'ampia gamma di tipi e forme per poter adattare le protesi alle caratteristiche personali ed ai lineamenti del viso dei pazienti.

FORME ANTERIORI SUPERIORI

I denti anteriori Myerson sono disponibili in tre tipi di forme:

1. **'A'** Forme Estetiche
2. **'Y'** Forme Giovanili
3. **'P'** Forme Principali


CODICE			
Tipo di forma			
			
	Estetica	Giovanile	Principale

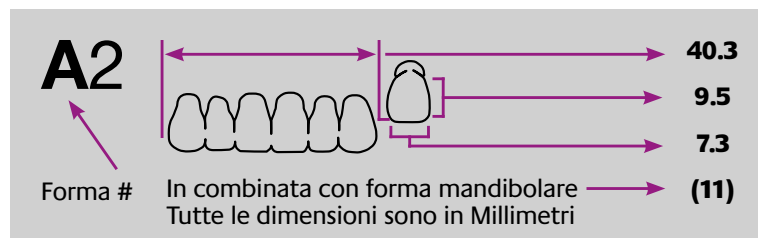


'Y' Forme Giovanili

- Simili nell'estetica alle forme di tipo 'A', si differenziano per un bordo approssimale più corto
- Gradevole modellatura con un aspetto giovanile e vitale
- Linea linguale più lunga e più giovanile
- Meno striature ed effetti relativi all'età rispetto alle forme del tipo 'P'




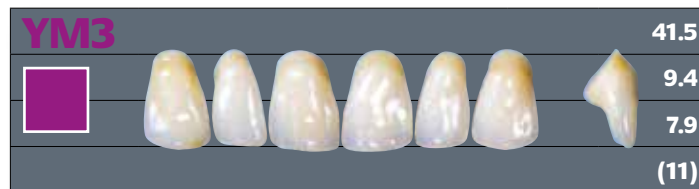


Anteriori inferiori - Forma 11, **Posteriori** - Forma 30

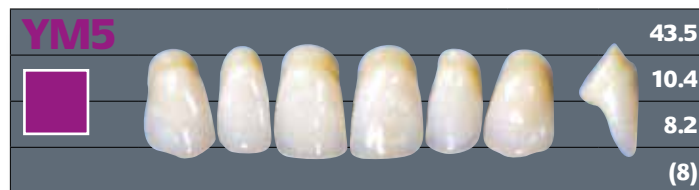

Anteriori inferiori - Forma 8, **Posteriori** - Forma 32

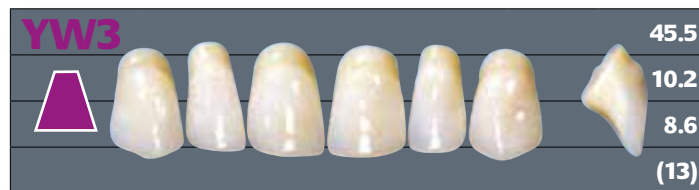

Anteriori inferiori - Forma 13, **Posteriori** - Forma 32

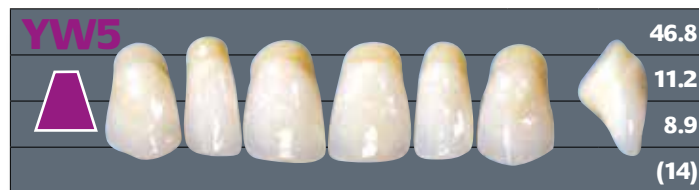

Anteriori inferiori - Forma 14, **Posteriori** - Forma 32

TABELLA DI ASSOCIAZIONE

ANTERIORI		FORMA COLLEGATA CON INFERIORE		ASSOCIAZIONI CON FORMA POSTERIORE		
FORMA	A/6mm	FORMA	A/6mm	FORMA	Superiore P/4mm	Inferiore P/4mm
A2	40.3	11	31.0	28	27.7	29.1
A4	41.4	7	32.0	28	27.7	29.1
A7	43.5	7	32.0	30	29.6	30.6
A9	44.5	8	33.1	32	31.6	33.0
A11	48.0	14	34.9	34	33.4	35.0
A13	50.3	16	36.7	34	33.4	35.0
A43	43.2	12	32.9	30	29.6	30.6
A44	45.0	13	34.7	32	31.6	33.0
A52	45.8	13	34.7	32	31.6	33.0
A53	47.0	16	36.7	34	33.4	35.0
A64	47.0	A71	35.0	32	31.6	33.0
A72	49.0	A73	36.5	34	33.4	35.0
YM3	41.5	11	31.0	30	29.6	30.6
YM5	43.5	8	33.1	32	31.6	33.0
YW3	45.5	13	34.7	32	31.6	33.0
YW5	46.8	14	34.9	32	31.6	33.0
PM2	41.8	11	31.0	30	29.6	30.6
PM4	43.8	12	32.9	30	29.6	30.6
PM6	45.8	13	34.7	32	31.6	33.0
PM8	47.2	14	34.9	34	33.4	35.0
PW2	46.4	13	34.7	32	31.6	33.0
PW4	47.8	A73	36.5	34	33.4	35.0
PW6	48.5	16	36.7	34	33.4	35.0
PW8	50.0	16	36.7	34	33.4	35.0

■ Gli Special anteriori si associano ai posteriori Special Duratomic, MU o GanyMed

■ I Caratterizzati e gli Standard anteriori si associano ai posteriori Standard Duratomic

Varietà delle Forme


I denti Myerson Special sono disponibili in un'ampia gamma di tipi e forme per poter adattare le protesi alle caratteristiche personali ed ai lineamenti del viso dei pazienti.

FORME ANTERIORI SUPERIORI

I denti anteriori Myerson sono disponibili in tre tipi di forme:

1. **'A'** Forme Estetiche
2. **'Y'** Forme Giovanili
3. **'P'** Forme Principali


CODICE			
Tipo di forma			
			
	Estetica	Giovanile	Principale

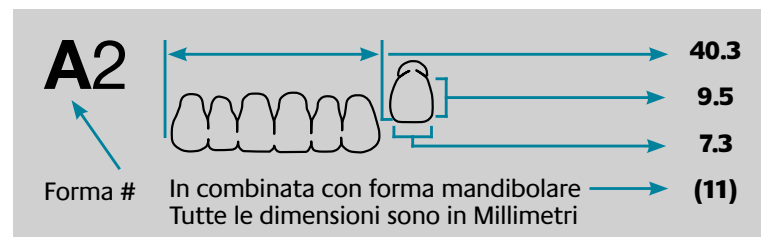


'P' Forme Principali

- Pensate per i pazienti più anziani
- Bordi approssimali meno inclinati e più corti per favorire l'inserimento e livellamento dei bordi in protesi parziali ed urgenti
- Eccellenti modellature con caratteristiche tipiche dell'età più pronunciate, irregolarità e curvature




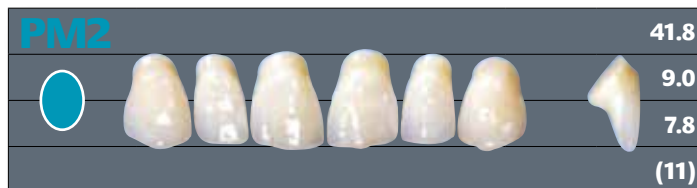


Anteriori inferiori - Forma 11, Posteriori - Forma 30

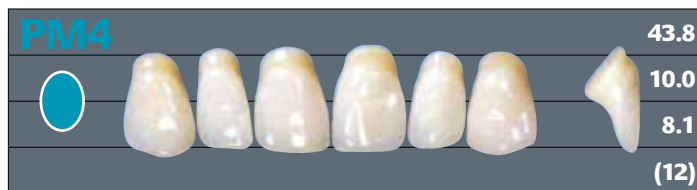

Anteriori inferiori - Forma 12, Posteriori - Forma 32

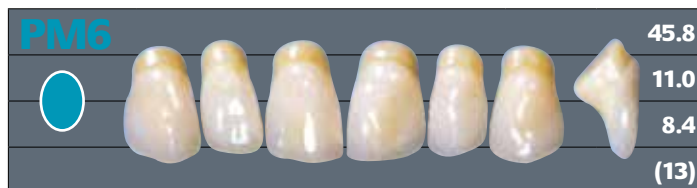


Anteriori inferiori - Forma 13, Posteriori - Forma 32

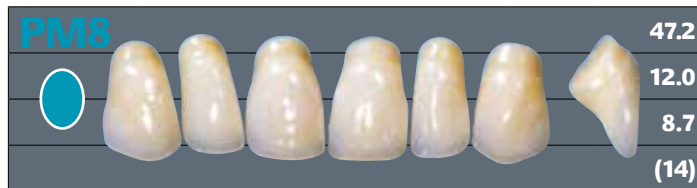


Anteriori inferiori - Forma 13, Posteriori - Forma 34




Anteriori inferiori - Forma 13, Posteriori - Forma 32

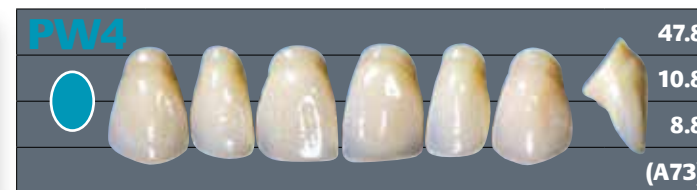

Anteriori inferiori - Forma A73, Posteriori - Forma 34

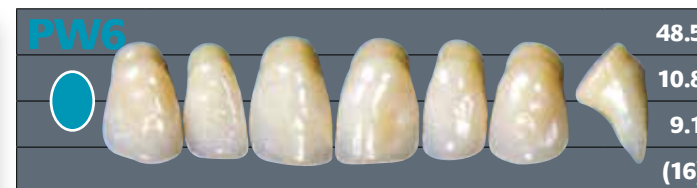


Anteriori inferiori - Forma 16, Posteriori - Forma 34

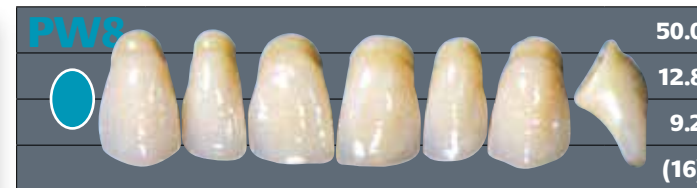

Anteriori inferiori - Forma 16, Posteriori - Forma 34


Denti Anteriori

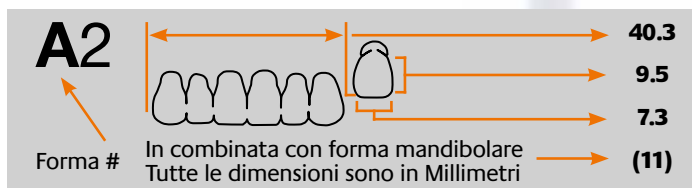


Anteriori superiori - Forme A4 • A7, **Posteriori** - Forme 28 • 30



Anteriori superiori - Forme - A9 • YM5, **Posteriori** - Forme 32

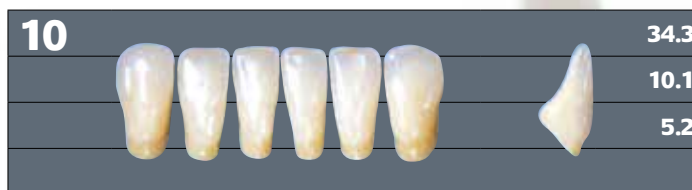


Anteriori superiori - Forme A2 • YM3 • PM2, **Posteriori** - Forme 28 • 30

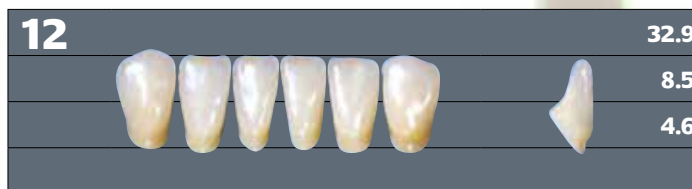


Anteriori superiori - Forme A43 • PM4, **Posteriori** - Forme 30




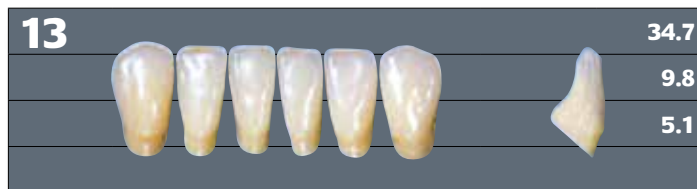



Anteriori superiori - Forme A44 • A52 • YW3 • PM6 • PW2, **Posteriori** - Forme 32

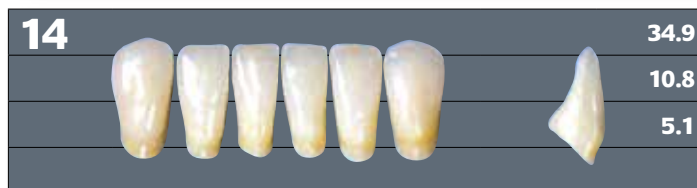

Anteriori superiori - Forme - A11 • YW5 • PM8, **Posteriori** - Forme 34 • 32

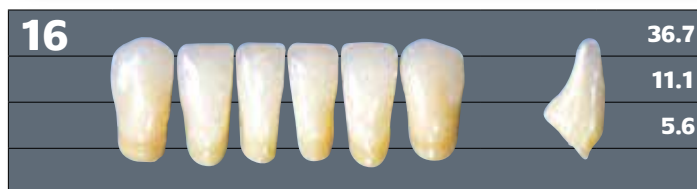

Anteriori superiori - Forme - A13 • A53 • PW6 • PW8, **Posteriori** - Forme 34

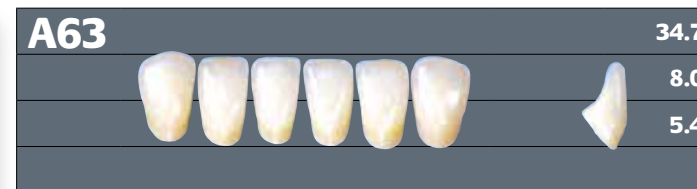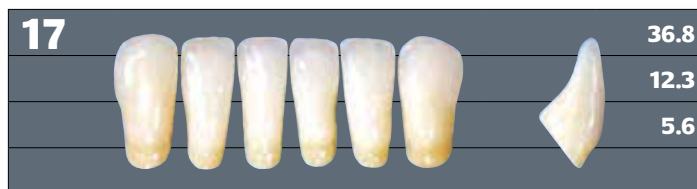

Anteriori superiori - Forme - A64, **Posteriori** - Forme 32



Anteriori superiori - Forme - A72 • PW4, **Posteriori** - Forme 34

Denti Posteriori

Myerson offre una scelta di denti posteriori per consentire a clinici e tecnici di soddisfare le esigenze dei pazienti con il ‘metodo’ meno complicato possibile.

Duratomic¹ – angolo cuspidale: 30 gradi.
Indicazioni: Protesi complete e parziali

- Superfici occlusali cuspidali basse per una forma naturale, un buon contatto e movimento laterale facilitato
- Facilità e velocità di posizionamento in occlusione bilanciata con poca o nessuna correzione successiva alla lavorazione
- Abrasione simulata sulle cuspidi inferiori: si uniforma bene con la dentatura naturale
- Superfici linguali lunghe: migliora il comfort e la fonetica del paziente

- Materiale Durablend – rete polimerica interpenetrante per una eccezionale resistenza all’uso

GanyMed² – Angolo cuspidale: 30 gradi
Indicazioni:

- Protesi complete e parziali
- Come per Duratomic, con l’aggiunta di un materiale Durablend rinforzato con sub-micron di silice (composite), che ne aumenta ulteriormente la durezza e la resistenza all’uso


1 Special Duratomic in associazione ai denti anteriori Myerson Special. Standard Duratomic in associazione ai denti anteriori Caratterizzati e Standard.
2 GanyMed in associazione ai denti anteriori Myerson Special.

TABELLA COLORI	Myerson Special & GanyMed		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
	Comparazione Colore Myerson Caratterizzato*		I	H	F	C	B	I	H	E	E	I	74	C	41	70	71	70

NUOVE COLORAZIONI	I61	I62	I65	I66	I67	I81
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----


*Colorazione più simile disponibile



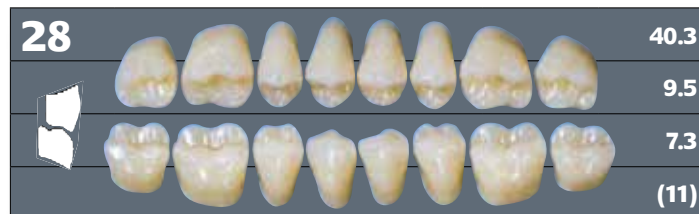


Anteriori superiori - Forme A2 • A4

Anteriori inferiori - Forme 11 • 7

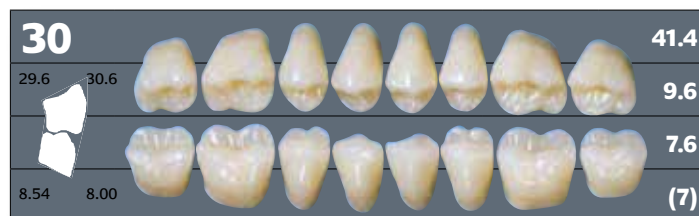


Anteriori superiori - Forme A7 • A43 • YM3 • PM2 • PM4

Anteriori inferiori - Forme 7 • 11 • 12

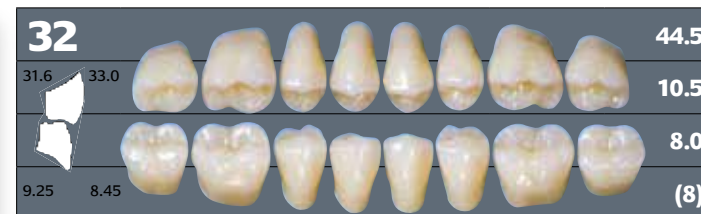


Anteriori superiori - Forme A9 • A44 • A52 • A64 • YM5 • YW3 • YW5 • PM6 • PW2

Anteriori inferiori - Forme 8 • 13 • A71

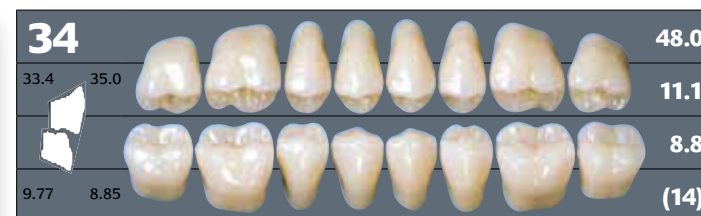

Anteriori superiori - Forme A11 • A13 • A53 • A72 • PM8 • PW4 • PW6 • PW8

Anteriori inferiori - Forme 14 • 16 • A73

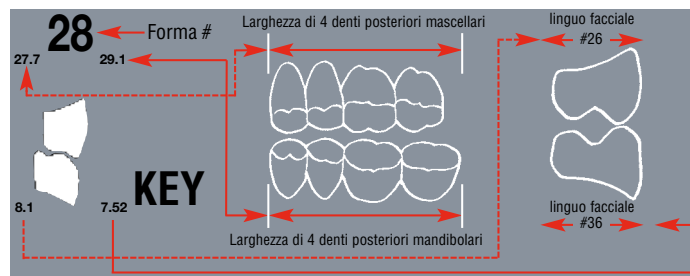

E ancora da **myerson...**

Materiali termoplastici
all'avanguardia

resina copolimerica
acetica **altamente
cristallina**

Una scelta trasparente
per ganci **flessibili
estetici**

