

MAGIC SIL

PUTTY SOFT



Silicone-A ad altissima viscosità per protesi fissa.
Tecnica suggerita: doppia impronta con portaimpronte standard.

Caratteristiche:

Impasto molto raffinato, soffice, non mucocomprime
 Resistenza alla deformazione, eccellente recupero elastico, elevata stabilità dimensionale.
 Durezza dopo 24 h: 52 Sh A
 Rapporto ideale tra tempo di lavorazione e tempo di indurimento (effetto Snap-set):
 lungo tempo di lavorazione - minor tempo di permanenza nel cavo orale.

NORMAL SET

Tempo di miscelazione (23°C/73°F)	30"
Tempo di lavorazione	90"
Permanenza nel cavo orale	180"
Tempo di presa (23°C)	5'00"
Recupero elastico	> 99.4 %
Variazione dimensionale dopo 24 ore	< -0.20 %
Durezza (Shore A)	52

FAST SET

Tempo di miscelazione (23°C/73°F)	30"
Tempo di lavorazione	90"
Permanenza nel cavo orale	90"
Tempo di presa (23°C)	3'30"
Recupero elastico	> 99.4 %
Variazione dimensionale dopo 24 ore	< -0.20 %
Durezza (Shore A)	52

DIN EN 24823 / ISO 4823 CE Made in Italy

WASH

LIGHT	REGULAR
STD2060046	STD2060047

Caratteristiche:

Massima precisione nella riproduzione dei dettagli
 Elevata resistenza alla lacerazione
 Eccellente recupero elastico
 Elevata stabilità dimensionale
 Pigmenti opacizzati per una migliore lettura dei dettagli
 Possibilità di colare il modello immediatamente
 Rapporto di miscelazione 1:1

REGULAR BODY

Silicone-A idrofilo a media viscosità. Per protesi fissa e protesi removibile totale o parziale. Fluido indicato per la tecnica simultanea o monofase con portaimpronta individuale.

REGULAR BODY

Tempo di miscelazione	automix
Tempo di lavorazione	90"
Permanenza nel cavo orale	150"
Tempo di presa (23°C)	4'00"
Recupero elastico	> 99.8 %
Variazione dimensionale dopo 24 ore	< -0.20 %
Durezza (Shore A)	45

DIN EN 24823 / ISO 4823 CE Made in Italy

MAGIC ICE

Spray ecologico ipotermizzante

Indicato per test di vitalità pulpare,
 desensibilizzazione delle mucose per preanestesia.
 Flacone dotato di pratica microcanula applicatrice.
 Gradevole gusto alla menta naturale.

Confezione: 200 ml

REF.	STD1040008
------	------------

DISPOSITIVO MEDICO CHIRURGICO DI CLASSE IIB - PER L'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI

Lory's Line

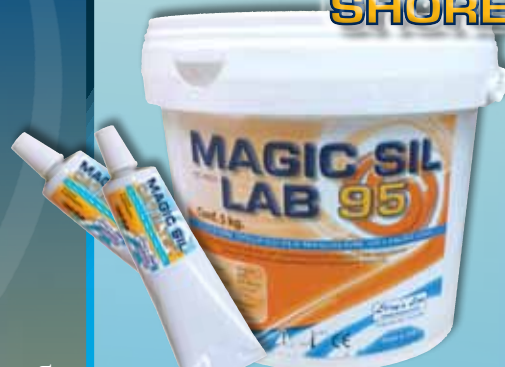


laboratorio

Lory's Line

MAGIC SIL LAB

PRODUZIONE ITALIANA

MAGIC SIL
LAB 95
SHORE

REF.	LBR108007
------	-----------

Confezione:
 5 Kg + 2 indurenti 60 ml

Silicone-C specifico per realizzare mascherine
 per la zeppatura della resina in protesi combinata,
 per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori,
 per riprodurre maschere gengivali removibili,
 per il controllo nella progettazione della struttura
 metallica e indicato anche per l'isolamento
 denti/gesso in muffola.

Vantaggi e Caratteristiche:

Altissima scorrevolezza iniziale
 Elevata riproduzione dei dettagli
 Nessuna deformazione in muffola e resistenza alla rottura
 Resistenza al calore 110°C
 Silicone miscelabile con il catalizzatore in gel o liquido

Tempo di lavorazione	1'00"
Tempo di presa	5'00"

MAGIC SIL
LAB 85
SHORE

REF.	LBR108006
------	-----------

Confezione:
 5 Kg + 2 indurenti 60 ml

MAGIC SIL PUTTY

Silicone-A ad elevata precisione specifico per il laboratorio

Per controstampi in protesi totale e come supporto per la lavorazione
 di materiali estetici privi di metallo. Per mascherine di controllo per
 la progettazione della struttura metallica, per la zeppatura della protesi
 combinata, l'esecuzione di manufatti protesici provvisori e riproduzioni
 di maschere gengivali removibili.

Vantaggi e Caratteristiche:

Resistenza al calore oltre i 200°C
 Eccellente definizione dei dettagli
 Variazione dimensionale: -0.058% dopo 24 ore
 Nessuna deformazione in muffola
 Rapporto di miscelazione 1:1
 Durezza finale 90 Shore

Confezione:
 5 Kg Base (A) Grigio
 + 5 kg Catalizzatore (B) Rosa

Tempo di lavorazione	1'00"
Tempo di presa	5'00"

REF.	LBR108008
------	-----------

MAGIC OCCLUSPRAY

Spray micropolverizzato per rendere visibili i punti e le superfici di contatto

E' un indicatore colorato universale per il controllo dei contatti occlusali e della
 precisione di ponti e corone. Grazie alla sua bomboletta dotata di valvola brevettata,
 garantisce uno spruzzo omogeneo con un solo passaggio senza sprechi.
 Lo strato pigmentato è facilmente rimovibile con acqua senza lasciare residui.

Utilizzo:

agitare la bomboletta prima dell'uso e spruzzare poco prodotto da una distanza di
 2-5 cm sulle superfici occlusali o sul lato interno del ponte o della corona. Tutti i punti
 di contatto sono facilmente individuabili come punti difettosi nella pellicola colorata.

omogeneo

colore
verde

Confezione: 75 ml

REF.	LBR501001
------	-----------

PRODUZIONE TEDESCA

CE



Lory's Line
 Qualità al giusto prezzo





MAGIC ETCH 36%

Gel Mordenzante Tissotropico a base di Acido ortofosforico 36%

La sua tissotropicità e fluidità permette un posizionamento estremamente preciso sulle aree selezionate evitando uno scorrimento indesiderato. La sua capacità di sciogliere il fango dentinale permette all'adesivo di creare uno strato ibrido resistente ed elastico. I coloranti consentono un ottimo contrasto con la mucosa permettendo il perfetto controllo dell'area da mordenzare. Facile da rimuovere con un semplice risciacquo.

TEMPI RACCOMANDATI DI APPLICAZIONE:

Sulla dentina	10-15 sec.
Sullo smalto	15-30 sec.
Su denti decidui e con alto contenuto di fluoro	50-80 sec.

PRODUZIONE TEDESCA

CE 0124



REF.	STD3040008
------	------------

Confezione:
1 Siringa da 12 gr.
5 Aghi per Etch standard
5 Aghi per Etch di precisione

THE BIG ONE
70 gr
DI CONVENIENZA



REF.	STD3040011
------	------------

Confezione:
1 Siringa da 70 gr.
5 Mini siringhe
25 Aghi per Etch standard
25 Aghi per Etch di precisione

MAGIC IMPLAFIX SP

Cemento semipermanente per l'impiantologia

Cemento semipermanente indurente duale a base di metacrilati multifunzionali e ossido di zinco. Ideale per la cementazione nel fissaggio di protesi e corone su monconi implantari. Ha una buona elasticità dovuta ad una leggera espansione e permette una discreta rimovibilità del manufatto. Grazie al ridotto spessore del film ed essendo non solubile, consente un ottimo sigillo marginale e facilita l'igiene orale evitando le infiltrazioni nel tempo. Non influenza l'indurimento di compositi e cementi usati successivamente.

Vantaggi e caratteristiche:

Eccellente stabilità, bassa solubilità, minimo spessore (< 15 micron), alta radiopacità (200% Al)



Confezione:
1 Siringa automix da 5 ml
10 canule

REF.	STD4090023
------	------------

CE 0482

PRODUZIONE TEDESCA

MAGIC OMNI-CEM

Cemento composito universale dual care con nano-fluorapatite

Composito microibrido fluido duale auto-fotopolimerizzante arricchito di nano-fluorapatite per cementazioni permanenti di inlays, onlays, ponti, corone, faccette e perni endodontici in fibra di carbonio e fibra di vetro. Ottimo materiale da riempimento altamente radiopaco e molto resistente alla compressione. Le particelle di nano-fluorapatite contribuiscono alla rimineralizzazione della dentina.

Resistenza alla compressione	180 MPa
Resistenza alla flessione	165 MPa
Spessore del Film	10 µm
Radiopacità (% di Al)	250% Al
Profondità di polimerizzazione	8 mm

Tempo di lavorazione	2'00"
Tempo di indurimento a 37°C	3'30"
Polimerizzazione con lampada a Led	20"



Confezione:
1 Siringa automix da 5 ml
10 canule

REF.	STD4090022
------	------------

PRODUZIONE TEDESCA

CE 0482

Lory's Line

MAGIC POST

Perni endocanalari in fibra di vetro traslucenti e radiopachi

Sono composti da fibra di vetro tipo "S" e resina epossidica. La traslucenza del perno facilita restauri estetici. Possono essere sterilizzati in buste mediante autoclave a 135° C. Alto livello di biocompatibilità.

Vantaggi e caratteristiche:

corretta elasticità simile alla dentina, elevata adesione, notevole resistenza, ottima radiopacità. Elevata resistenza alla flessione (1400 Mpa) Modulo elastico bilanciato in flessione 50 Gpa Ruvidi in superficie. Resilienti (resistenza agli shock improvvisi) Estetici

Lunghezza perni: 20 mm

Confezioni da 10 perni



PRODUZIONE ITALIANA

MAGIC POST CL

Perno di forma cilindrica con microconicità in punta

Diametro	0,8	1,0	1,2	1,4
REF.	STD319MPL1	STD319MPL2	STD319MPL3	STD319MPL4

MAGIC POST CN

Perno di forma conica con conicità variabile

Conicità	4%~6%	6%	6%~8%
Diametro	0,5~1,10	0,6~1,26	0,7~1,56
Misura	SMALL	MEDIUM	LARGE
REF.	STD319MPNS	STD319MPNM	STD319MPNL

CE 0476



MAGIC CORE NANO3

Materiale composito a polimerizzazione duale e bassa viscosità

per la cementazione di perni in fibra e ricostruzione di monconi

Le proprietà di indurimento duale permettono al dentista di eseguire cementazioni anche nei casi in cui la fotopolimerizzazione non dà sufficienti garanzie di indurimento.

Consistenza simile alla dentina, ma abbastanza fluido per la cementazione intracanalare, sfruttata in modo efficace la capacità delle nano fibre di creare un alto livello di contatto fisico con le sostanze circostanti. Grazie ad un ottimo modulo elastico combinato con un'elevata resistenza alla compressione, è in grado di resistere al meglio alle sollecitazioni dei carichi masticatori. Gli alti valori di resistenza alla compressione e alla flessione assieme alla modestissima retrazione lineare, assicurano un'ottima risposta alla polimerizzazione con elevata affidabilità nel tempo.

Vantaggi:

Può essere applicato direttamente Indurisce rapidamente con lo sviluppo di calore

Tempo di lavorazione	1'30"
Tempo di indurimento a 37°C	2'30"
Polimerizzazione con lampada a Led	40"



Confezione:
1 Siringa automix da 5 ml
5 canule + 5 oral tips

REF.	STD3150021
------	------------

PRODUZIONE TEDESCA

Resistenza alla compressione	256 MPa
Resistenza alla flessione	130 MPa
Retrazione lineare	1,2%
Radiopacità (% di Al)	400% Al
Resistenza alla Trazione	40N/mm2

MAGIC ETCHBOND S2 NANO

Sistema adesivo duale, auto mordenzante di sesta generazione

Ideale sia su smalto che dentina che qualunque tipo di restauro e cementazione.

Restauri diretti autopolimerizzanti e a doppia polimerizzazione ricostruzione di monconi, restauri diretti fotopolimerizzabili con compositi, compomeri. Cementazione adesiva di perni radicalari/perni in fibra con cemento composito duale o autopolimerizzante, restauri indiretti con l'impiego di cementi resinosi duali o autopolimerizzanti per la cementazione di inlay, onlay, corone e ponti

Vantaggi:

Polimerizzazione chimica grazie all'aggiunta dell'attivatore B nelle aree non raggiungibili con la lampada polimerizzatrice B raggiunge le stesse proprietà adesive delle preparazioni total-etch senza la fase di mordenzatura separata della sostanza dentale

Adesione su smalto (dual cure) 24 Mpa	Adesione su dentina (dual cure) 17Mpa
Adesione su smalto (self cure) 18 Mpa	Adesione su dentina (self cure) 16Mpa

Confezione:
1 Flacone da 5 ml parte A
+ 1 Flacone da 5 ml parte B

REF.	STD3150022
------	------------

PRODUZIONE TEDESCA

CE 0482



QUALITÀ AL QUINTO PREZZO

Guanti medicali monouso

AQL 1,5



XS	REF.	STD901000X
S	REF.	STD901000S
M	REF.	STD901000M
L	REF.	STD901000L

MAGIC CHLOR

senza polvere

Guanto non sterile **senza polvere**, in lattice di gomma naturale con contenuto proteico <50 µg/g, ambidestro. Colore: bianco/lattice Lunghezza: 240 mm min. Spessore palmo: 0,15 mm (tolleranza ± 0,03 mm) Polsino salvaspazzo

DESCRIZIONE

Guanto medicale in lattice di gomma naturale **senza polvere** lubrificante ad elevata bio-compatibilità, microruvido e con ottima presa sul bagnato, con elevate caratteristiche prestazionali, di qualità controllata e certificata. Sottoposto a processo interno di alogazione ed esterno "polymer washed" off line. Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 boxes per cartone. Disponibile nelle misure: XS 5-5,5 • S 6-6,5 • M 7-7,5 • L 8-8,5

Dispositivo Medico di Classe I a ai sensi D.Lgs.46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.. Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008: Cod. T010201. N° Repertorio 78712/R. Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e alle norme tecniche EN 374.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

AQL<1,5 (livello G1) per assenza di fori / AQL 2,5 (livello S2) per maggiori e minori difettosità / AQL 4,0 (livello S2) per dimensioni e proprietà fisiche, con riferimento alle norme ASTM D 3578.

MAGIC POWDER

con poca polvere

XS	REF.	STD901999X
S	REF.	STD901999S
M	REF.	STD901999M
L	REF.	STD901999L

Guanto non sterile, in lattice di gomma naturale, ambidestro, con contenuto proteico <50 µg/g, lubrificato internamente **con polvere** di amido di mais bio-assorbibile con requisiti prestazionali conformi alle normative relative ai Dispositivi Medici di Classe I a. Colore: bianco/lattice Lunghezza: 240 mm min. Spessore palmo: 0,12 mm (minimo) Polsino salvaspazzo

DESCRIZIONE

Guanto medicale a finitura interna/esterna opaca, lubrificato internamente con polvere vegetale bio-assorbibile. Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 boxes per cartone. Disponibile nelle misure: XS 5-5,5 • S 6-6,5 • M 7-7,5 • L 8-8,5

Dispositivo Medico di Classe I a ai sensi D.Lgs. 46/97 (in attuazione Direttiva 93/42/CEE), emendato con D.Lgs. 37/10 (in attuazione Direttiva 2007/47/CE) e s.m.i.. Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) ai sensi D.M. Min. Salute del 13.3.2008:Cod. T010201. N° Repertorio 91361/R. Conforme alle norme EN 455 1-2-3 e alle norme tecniche EN 374.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

AQL<1,5 (livello G1) per assenza di fori / AQL 4,0 (livello S2) per altre caratteristiche, con riferimento alle norme ASTM D 3578.

MAGIC OIL

Olio lubrificante per la manutenzione di manipoli contrangoli, turbine e motori ad aria

Per assicurare una lunga durata agli strumenti, questo spray va utilizzato prima e dopo ogni ciclo di sterilizzazione. Spruzzare per due secondi tenendo la bombola in posizione verticale utilizzando l'adattatore idoneo.

Multiflex: Per Turbine

REF.	STD7060008
------	------------

Intra Quick: Per Contrangoli

REF.	STD7060009
------	------------

Confezione: 500 ml

REF.	STD7060004
------	------------

CE



PRODUZIONE TEDESCA

QUALITÀ AL QUINTO PREZZO